

LED Ringlicht Ryf RL4 -Serie



**LED Ringlicht
Serie Ryf RL4
für Stereomikroskope**



LED Ringlicht Ryf RL4 -Serie

LED-Ringlicht Ryf RL4

Die LED-Ringlicht-Serie RL4 wurde hauptsächlich für Beleuchtungsaufgaben im Rahmen der Stereo-Mikroskopie entwickelt.

Unter anderem eignet es sich hervorragend für Anwendungen in der Qualitätskontrolle und Inspektion. Das RL4 mit einem Standard-Durchmesser von 66mm liefert ein gleichmäßiges, schatten- und flackerfreies Licht und ist grundsätzlich für jeden Kamera- und Mikroskoptyp geeignet.

Das Ringlicht besteht in der Basisversion aus 48 langlebigen, weißen LEDs, ist jedoch auch mit neutralweissen, roten, grünen und blauen LEDs erhältlich.

Als wichtiges Zubehör liefert eine Diffusorscheibe optional ein breit gestreutes Licht ohne Spiegeleffekte. Reduzierringe in verschiedenen Größen ermöglichen eine perfekte Anpassung des Ringlichts an andere Durchmesser bis 50mm.

- Energiesparende und somit umweltfreundliche Beleuchtungstechnik.
- Lange LED-Lebensdauer bis ca. 50.000 Stunden
- Auch mit neutral-weissen (NW), roten, grünen und blauen LEDs erhältlich
- Gleichmäßige und schattenfreie Beleuchtung
- Flackerfrei
- Stufenlose und sehr ausgewogene Helligkeitseinstellung von 0% bis 100% mit praktischem Tischregler
- Mit Reduzierringen perfekt an kleinere Durchmesser bis 50mm adaptierbar
- Einfache und abdruckfreie Befestigung durch Edelstahlklemmschraube
- Ausgerüstet mit hochwertigen Industriesteckern mit Einrast-Verriegelung
- Eine Diffusor-Scheibe sorgt als Zubehör für ein breit gestreutes Licht ohne Spiegeleffekte





made in Germany!

LED Ringlicht Ryf RL4 -Serie

Technische Daten:	
Gewicht	0,30 kg
Abmessungen	Ø 66 mm, Höhe: 33 mm
Betriebsspannung	24V DC
Leuchtmittel	48 LEDs
Lichtfarbe	weiß, Tageslicht ähnlich
Ø LED-Lebensdauer	ca. 50.000 Std. (nach Herstellerangaben)
Farbtemperatur	ca. 6000 - 7000 K
Lichtsteuerung	stufenlose elektronische Dimmung
Arbeitsabstand	50-150 mm
Material	Aluminium und Kunststoff
Farbe	schwarz

Lieferinformationen:	
Größe mit Verpackung (L x B x H)	255 x 155 x 90
Gewicht mit Verpackung	0,35 kg
Zolltarifnummer	9405409990
Lieferbar	sofort

Lieferumfang:	
1 x LED-Ringlicht RL4	
1 x Table Control TC250	
1 x Steckernetzteil 24 V mit Industriestecker	
1 x Bedienungsanleitung	

Produktvarianten / Bestellnummern:
Ryf-RL4-NW, Nr. 100-007394, LED weiss 4'600 – 5'600°K
Ryf-RL4-R, Nr. 100-006049, LED rot
Ryf-RL4-G, Nr. 100-006050, LED grün
Ryf-RL4-B, Nr. 100-006051, LED blau

Ersatzteile:	
	Rändelschraube M4 x 20 Art.-Nr.: 100-005889
	Steckernetzteil 24 V, mit Industriestecker Betriebsspannung: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgangsspannung: 24V DC Schutzklasse II (schutzisoliert) Art.-Nr.: 100-004900
	Table Control TC250 Art.-Nr.: 100-005170 Table Control TC400 (für RL4-G und -B) Art.-Nr.: 100-006304 Table Control TC600 (für RL4-R) Art.-Nr.: 100-006305 Table Control TC900 (für RL4-IR) Art.-Nr.: 100-005897

Zubehör:	
	Reduzierung zur Adaption an andere Ø: Art.-Nr.: 100-005115 - Ø 50 mm Art.-Nr.: 100-005116 - Ø 52 mm Art.-Nr.: 100-003976 - Ø 54 mm Art.-Nr.: 100-003977 - Ø 56 mm Art.-Nr.: 100-003978 - Ø 58 mm Art.-Nr.: 100-003979 - Ø 60 mm Art.-Nr.: 100-003980 - Ø 62 mm Art.-Nr.: 100-003976 - Ø 64 mm
	Diffusor-Scheibe Art.-Nr.: 100-004522


Ähnliche Produkte:
RL4-UV400, Art.-Nr.: 100-005877, LED: UV 400nm
RL4-UV375, Art.-Nr.: 100-006295, LED: UV 375nm
RL4-UV365, Art.-Nr.: 100-006300, LED: UV 365nm
RL4-IR, Art.-Nr.: 100-005896, LED: IR





LED Ringlicht Ryf RL4 -Serie

Maßzeichnung: (alle Angaben in mm)

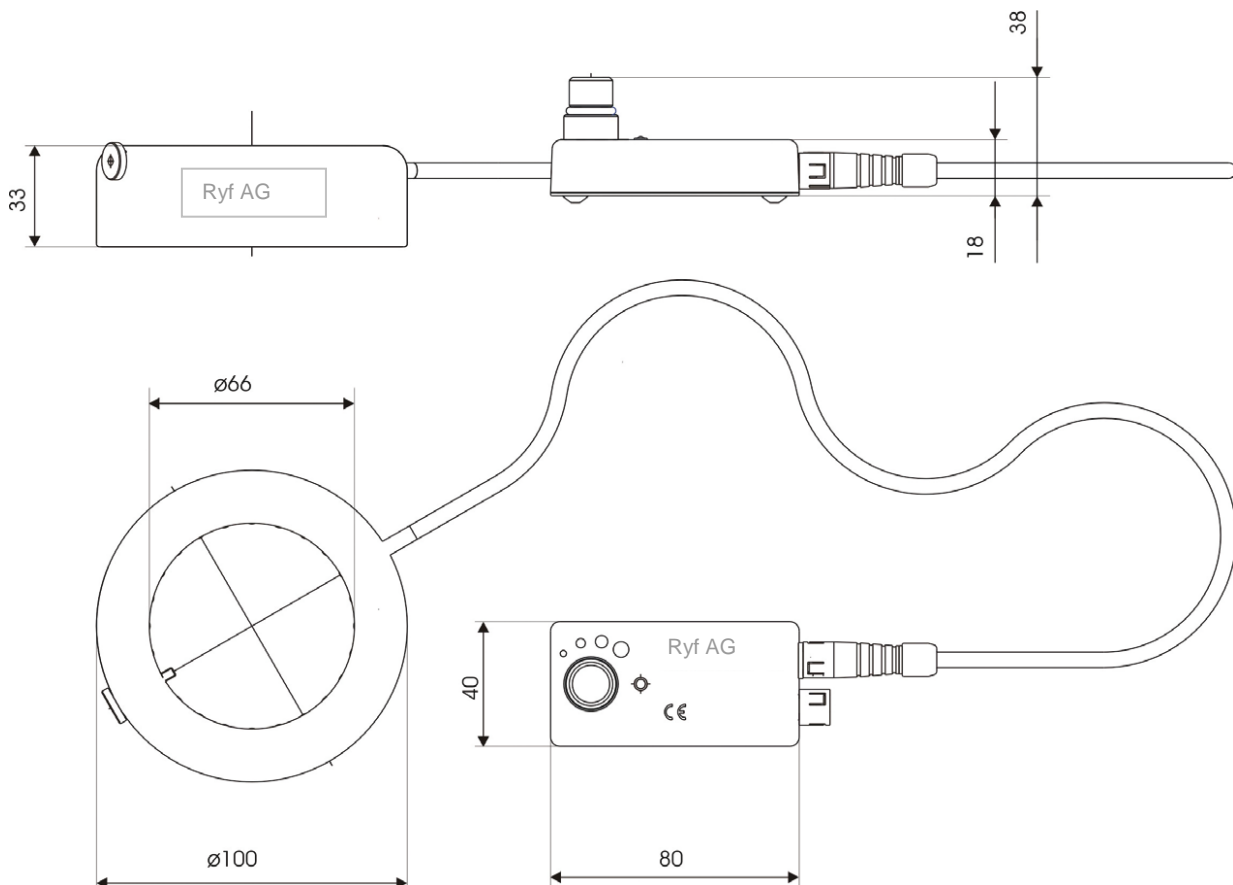

RL4 NW Ringlicht montiert mit Adapter auf Nikon SMZ 745