

Éclairage annulaire LED série Ryf RL4b



Éclairage annulaire LED Ryf RL4b pour microscope stéréo



Éclairage annulaire LED série Ryf RL4b

La série d'éclairage annulaire LED RL4b a été développée pour l'éclairage en microscopie stéréo. En outre elle est parfaitement qualifiée pour un usage en assurance qualité et inspection. La RL4b avec un diamètre standard de 66mm fournit une lumière régulière, sans ombre et stable. Elle est compatible avec tous types de caméras et de microscopes. La version de base est composée 48 LED blanches à longue durée de vie. Un diffuseur en option permet de réduire les reflets. Des anneaux de réduction permettent une adaptation de l'éclairage annulaire à tous types de microscopes.

- Une technique d'éclairage économe en énergie
- Une longue durée de vie des LED jusqu'à env. 50.000 heures
- Disponibles avec des LED en blanc neutre à 5'600°K
- Eclairage régulier et sans ombre
- Sans scintillement
- Réglage de luminosité continu et stable de 0% à 100%
- Adaptable aux diamètres plus petit jusqu'à 50mm grâce les anneaux de réduction
- Fixation simple et sans empreinte avec des (3) vis de serrage en acier
- Equipé avec des connecteurs de haute qualité avec verrouillage à encliquetage
- Diffuseur en option, voir photo page 3

Description of Buttons and Switches



- a) 3x vis moletée ou standard avec des boulons fileté imbus
- b) Pris pour le annulaire LED
- c) Interrupteur on/off et la commande pour régler la densité 8voir notre mode emploi)
- d) Control: le LED bleue est allumée si l'interrupteur et « on »
- e) Pris pour l'alimentation 230V

RL4b (NW blanc / lumière du jour kit avec 5'600 °K, sans diffuseur)

Éclairage annulaire LED série Ryf RL4b

Pièces détachées:

Photo no. 2:

Alimentation 24V ave prise électrique suisse
100 – 240V, 50 -60hz
Classe de protection/isolation II
No. cmde 100-004900

Photo no. 3:

Boîtier de contrôle TC250
No. cmde: 100-005170
Boîtier de contrôle TC400 (pour RL4-G et RL4-B)
No. cmde: 100-006304
Boîtier de contrôle TC600 (pour RL4-R)
No. cmde: 100-006305
Boîtier de contrôle TC900 (pour RL4-IR / infrarouge)
No. cmde: 100-005897

Accessoires:

Photo no. 4:

Anneaux de réduction / bague d'adaptions pour diamètres divers:
No. cmde 100-005115 pour Ø 50mm
No. cmde 100-005116 pour Ø 52mm
No. cmde 100-003976 pour Ø 54mm
No. cmde 100-003977 pour Ø 56mm
No. cmde 100-003978 pour Ø 58mm
No. cmde 100-003979 pour Ø 60mm
No. cmde 100-003980 pour Ø 62mm
No. cmde 100-003976 pour Ø 64mm



Photo no. 4

Photo no. 5:

Diffuseur pour réduire les reflets
No. cmde 100-004522b

RL4b avec option: 3x vis moletées



Photo no.2



Photo no. 3

Données techniques LED Ryf SA:

Poids	0.230 kg
Dimensions	Ø 66mm, h=25.5mm
Alimentation	24V DC
Eclairage	48 LED / DEL
Couleur	blanc, lumière du jour
Durée de vie des LED	Env. 50'000 heures
Température de couleur	5600 K°
Tension réglable	par régulateur
Distance de travail	50 -150mm
Matériaux	aluminium et plastique
Couleur	noir

Emballages / livraison:

Emballage en carton	255 x 155 x 90mm
Poids	0.40kg
No. de la douane	9405409990
Livraison	du stock Ryf SA

Inclus dans notre set:

1 x annulaire LED	RL4b
1 x variateur	RL4b NW sans diffuseur
1 x alimentation	24V
1 x mode d'emploi	d/e

Diffuseur pour RL4b





Photo no. 5

RL4b NW avec diffuseur



Éclairage annulaire LED série Ryf RL4b

Dimensions LED annulaire Ryf RL-4b:

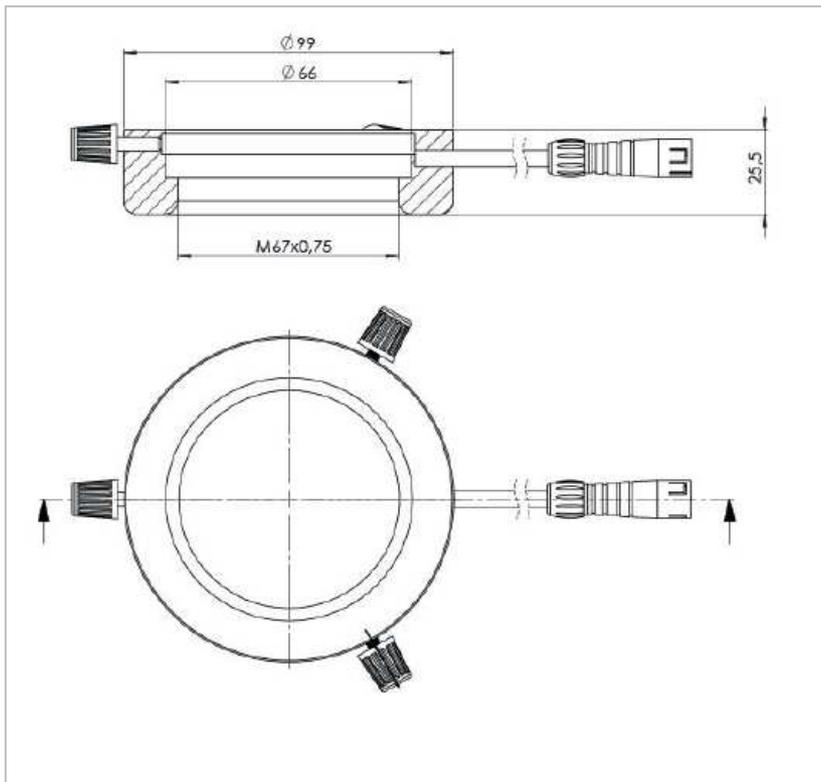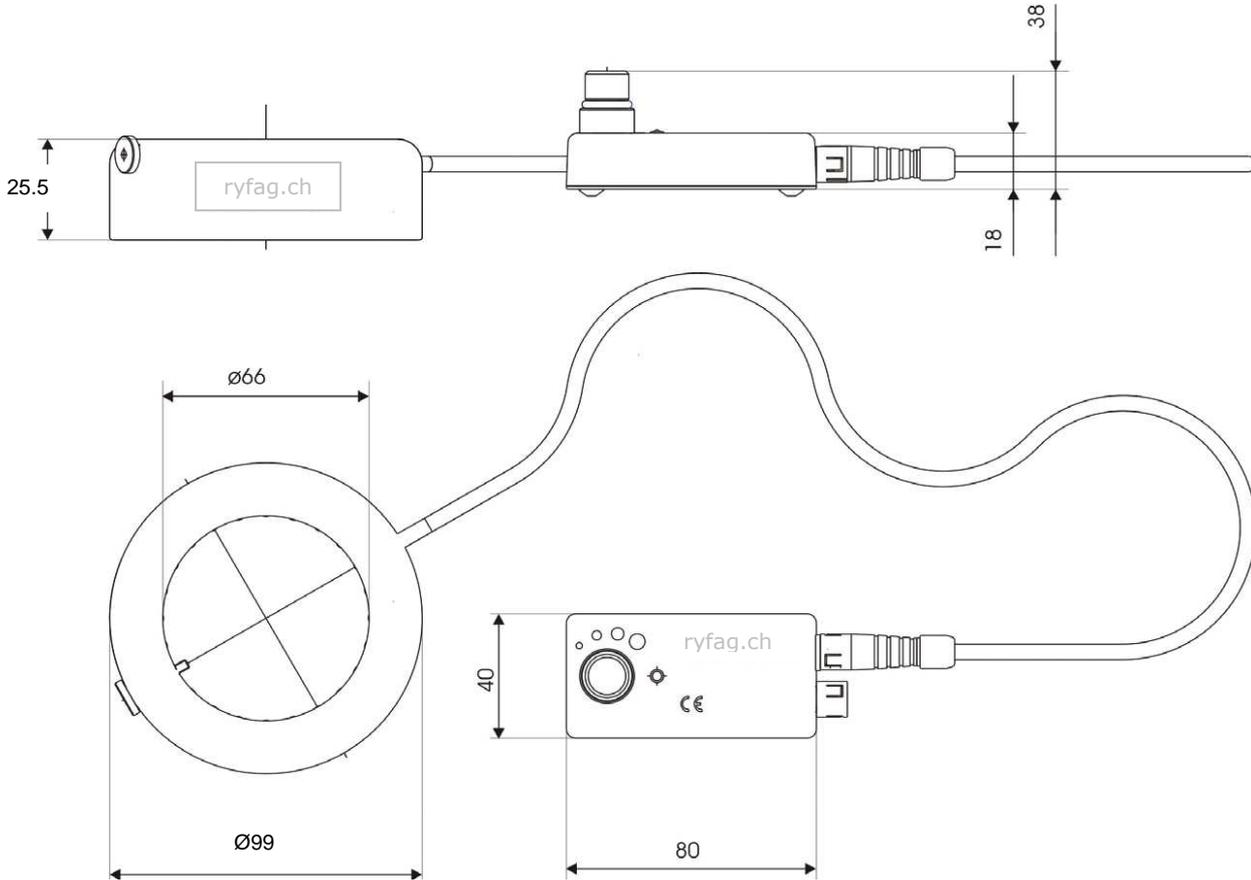

No. de commande:

no. 100-007394b: Ryf-RL4b

no. 100-004522b: Ryf diffuseur RL4b



www.ryfag.ch

www.ryfag.de

www.ryfag.fr