



MICROSCOPE ZOOM OPÉRATOIRE RYECO AM6000

ryeco
microscopes
+ swiss quality

NOUS RENDONS LA QUALITÉ VISIBLE

AJOUTEZ DU CONFORT À VOTRE PROFESSION GRACE À L'UTILISATION DU NOUVEAU RYECO AM6000 MICROSCOPE ZOOM 1:8




Caméra multifonctions 1080P
intégrée avec Wi-Fi pour Andoid ou
iPhone et iPad (sans fils).

- Le champ de vision de l'oculaire 10X est large (23 mm), sur demande 12.5X, . (1)
- Le facteur de grossissement du zoom, de 1:8, est le plus grand du marché. (2)
- Tête binoculaire ergonomique Super ERGO 0° à 180° ; cette tête binoculaire extrêmement inclinable permet un réglage de 0° à 180°. L'écartement entre les yeux se règle de manière très précise au moyen d'une échelle graduée à l'aide du bouton de réglage à gauche ou à droite)
- La caméra FULL HD intégrée comprend une image haute définition et un logiciel multifonctions (pas besoin d'ordinateur, utiliser simplement la souris sur l'écran). (3)
- a caméra intégrée comprend une fonction Wi-Fi pour montrer facilement les images ou vidéos en direct à votre patient (avec votre appareil Samsung, iPhone ou iPad / pas de câble supplémentaire requis). (3)
- Séparateur de faisceaux intégrés supplémentaire, pour ajouter une deuxième caméra si besoin (adaptateur pour appareils photos reflex NIKON et Canon disponible sur demande). (4)
- Installation et formation avec des techniciens formés chez Ryf et des dentistes suisses expérimentés.
- Support au sol, support mural ou de plafond sont également disponibles (montage et fixation par Ryf SA compris).
- Demos et formation chez nous à Grenchen/Granges ou à Commugny/VD
- **24 mois garantie Suisse et SAV par Ryf SA (Grenchen/SO ou Commugny/VD)**

ryeco
microscopes
+ swiss quality



- Ajustement de l'équilibre aisé et naturel grâce au long bras de suspension haut de gamme de 950 mm.
- Bouton de réglage de friction et de freinage.
- Le revêtement du bras porteur est constitué de matériaux PC respectueux de l'environnement, offre une meilleure résistance que l'ABS, garantit la longévité, empêche le vieillissement et les fissures.
- Les parties mécaniques du microscope Ryeco AM6000 sont principalement faites d'alliages d'aluminium 6061 (pour aérospatiale).
- Câble d'alimentation et câble HDMI sont intégrés dans l'axe du support et leurs prises sont placées à la base du support.

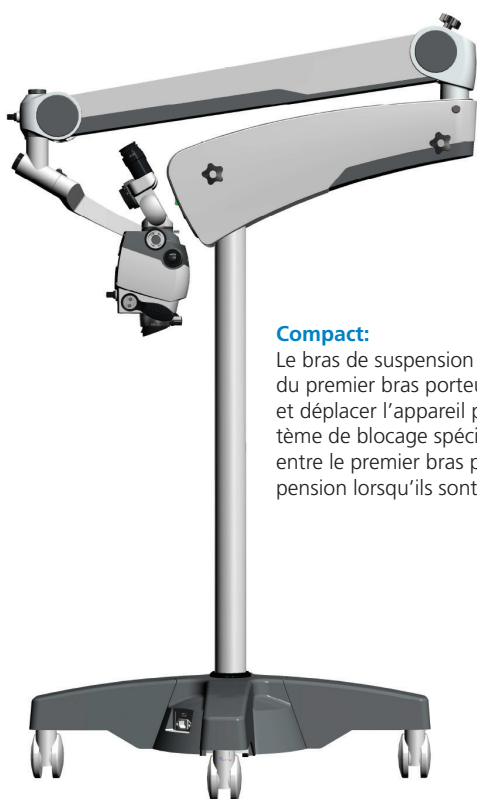

Compact:

Le bras de suspension peut être replié en haut du premier bras porteur pour gagner de l'espace et déplacer l'appareil partout facilement. Système de blocage spécial pour éviter la collision entre le premier bras porteur et le bras de suspension lorsqu'ils sont tous les deux repliés.





Boutton de poignée

Salle de démo et d'instructions Dental à Grenchen/Granges



Parfait pour les dentistes :

Le très grand champ de vision et le réglage précis du Variofocus (200 - 300mm) permettent une utilisation très confortable et ergonomique. Les poignées latérales ergonomiques dotées de boutons poussoirs permettent un contrôle facile de l'appareil photo. Le logiciel peut être utilisé directement au moyen de la souris (pas besoin de PC).



RYF AG

Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel +41 32 654 21 00
ryfag@ryfag.ch
www.@ryfag.ch

RYF SA Succursale

Route de Genève 9c
CH-1291 Commugny
Tel +41 22 776 82 28
ryfag@ryfag.ch
www.@ryfag.ch

RYF AG (Zürich)

Bahnhofplatz 17
CH-8400 Winterthur
Tel +41 52 560 22 25
ryfag@ryfag.ch
www.@ryfag.ch