

Schüler Stereomikroskop LAB10 / LAB20

ryeco
microscopes
+ swiss quality



Schüler Stereomikroskop LAB10 / LAB20

Super Preis-Leistung: Die Geräte der Ryeco LAB-LED Serie sind für ihre optische Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis für Schulen sehr interessant.

- Das optische System des LAB10 hat 2 verschiedene Fix-Vergrösserungen 20x / 40x
- Das LAB20 hat ein Zoomobjektiv 7x -45x.

Optisches System:

WF10x/20mm Okulare. **LAB10** mit zwei Objektiven 2x und 4x (mit Okulare 10x = 20x und 40x)

LAB20 mit 0.7x bis 4.5x Zoomobjektiv (mit Okulare 10x = 7x bis 45x). Höhere Vergrösserungen sind möglich mit zusätzlichen Okularen und Vorsatzlinsen.

Objektträger:

Alle Geräte verfügen über einen Objektträger mit zwei Klemmen und eine halbtransparente Durchlichtplatte.

Höhenverstellung / Fokussierung

Beidseitige grosse Triebknöpfe für Fokuseinstellung. Grobverstellung an der Säule.

Stereokopf:

Binokulare Stereoköpfe, 360° drehbar, 45° Schrägeinblick. Augenabstand zwischen 51 und 75mm einstellbar.
Okulare WF 10x/20mm

LED Beleuchtung:

Beleuchtung für Durch- und Auflicht mit LED Beleuchtung. Helligkeit Stufenlos einstellbar.
230V/50 Hz Versorgung. CH- Netzkabel inbegriffen.



Schüler Stereomikroskop LAB10 / LAB20

SERIE Ryeco LAB10 / LAB20 - Technische Daten

Modell	Kopf	Objective	Arbeitsabstand	Beleuchtung
LAB10	Binokular	2x – 4x (Fixvergrößerung, Drehbar)	80 mm	Durch- und Auflicht. LED Beleuchtung, Stufenlos regelbar mit höher Effizienz
LAB20	Binokular	0,7x ... 4,5x Stufenloses Zoom	85 mm	Durch- und Auflicht. LED Beleuchtung, Stufenlos regelbar mit höher Effizienz

Revolver
20x oder 40x

LAB10




Zoom
7x – 45x

LAB20



Schüler Stereomikroskop LAB10 / LAB20

SERIE Ryeco LAB10 / LAB20 - Zubehörteile

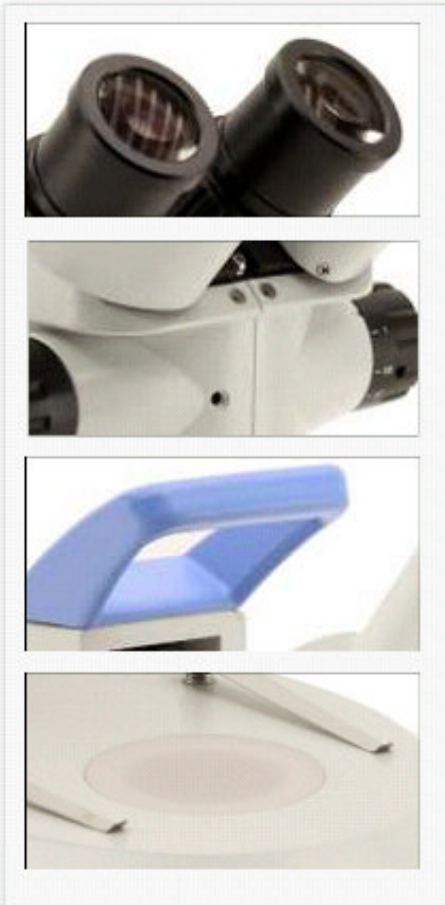

- ST-401 Okular (paar) WF10x/20mm
- ST-402 Okular (paar) WF15x/15mm
- ST-403 Okular (paar) WF20x/10mm
- ST-005 Mikrometrisches FK-Okular WF10x
- ST-410 Vorsatzlinse 0,5x für LAB20
- ST-024 Vorsatzlinse 1,5x für LAB20
- ST-415 Augenmuscheln (paar), Typ 1 (Standard)
- ST-417 Halbdurchsichtig Plastiktisch
- ST-029 Staubschutzhülle

Swiss guarantee & service

www.ryfag.ch

ryf ag **ryf** **swisservice**
 Repair & Service-Center www.ryfag.ch