

Microscope numérique 5MP sans oculaire RyecoCam FHD



R-FHD-3000-1001.1

ryeco
microscopes
+ swiss quality



Nouveau :

**Écran avec cadre métallique et
appareil photo 5 mégapixels**



Image capture: Click and capture image.



Video: Click and record video.



Preview: Click and view the captured image and video.



Setting: Click and enter the setting interface.



Measurement: Click and enter measuring interface.

Microscope numérique 5MP sans oculaire RyecoCam FHD

Ryecocam microscope digital FHD sans oculaire

Système de vidéo numérique compact en qualité Full HD (HDMI 1080P) avec un rapport qualité/prix excellente et avec une résolution de 1920 x 1080P et 60 images /sec.

Simple à utiliser /ergonomique et avec souris

- Acquisition d'images avec 5.0 MP
- Acquisition vidéo avec 1080P
- Sauvegarde des images très rapide sur clé USB ou SD
- Fils en croix pilotable par la souris
- simple logiciel pour comparaison et mesures (sans PC !)

Objectif zoom (optique):

- Agrandissement optique de 15x à 107x (écran 12")
- Distance de travail = 100mm
- FOV (champ de vision) = 16mm x 10mm
- Avec agrandissement min. = champ de vision de 16mm
- Avec agrandissement max. = champ de vision de 2.5mm

Éclairage LED:

- Éclairage annulaire LED à 56 LED, réglable

Caméra Full HD :

- Interface HDMI, 2MP
- Résolution: 1920x1080 P / 60 FPS
- Capteur Sony 1/3" // Taille des pixel 3.75 x3.75um
- FFP 60 Images /sec. (capture image très rapide)
- Enregistrement sur clé **USB* ou carte SD**


Écran LCD:

- Écran LCD 11.6 pouce, 1080P, HDMI, couleur

Ryeco by Ryf → avec „garantie Swiss“


www.ryfag.ch

(*clé USB seulement sans boîtier métallique)

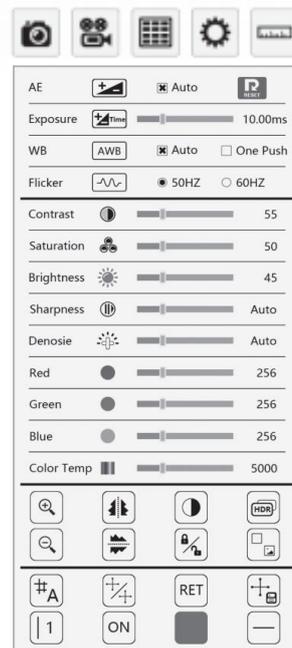


Menu de fonctionnement: sans PC!

Microscope numérique 5MP sans oculaire RyecoCam FHD

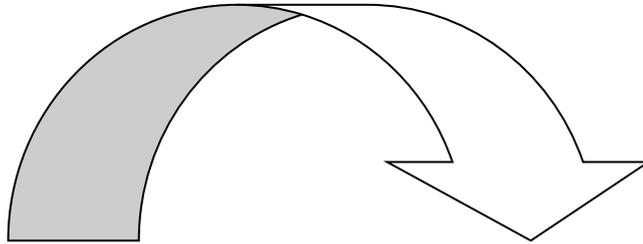

Outil de mesure:

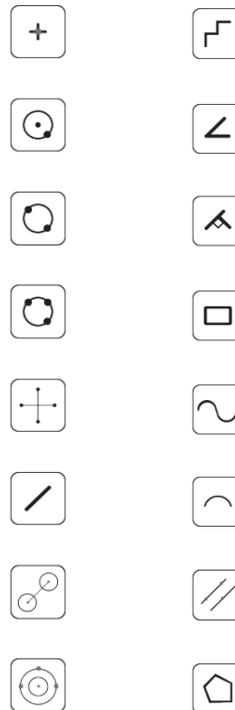

(Seulement des mesures indicatives,
remplace pas un microscope de mesure).

- 1) Focus
- 2) Réglage du zoom
- 3) Réglage pour LED annulaire (avec interrupteur, latéralement ci-dessous)
- 4) Interrupteur principal, prise HDMI, prise double USB (pour souris et clé USB), prise pour carte SD
- 5) double prise USB

Microscope numérique Ryecocam FHD, composé d'un trépied de lumière incidente avec commande de mise au point, système de zoom avec plage de grossissement de 15x à 107x et distance de travail = 100mm, caméra Full HD/5.0MP avec HDMI, résolution 1920x1080P, capteur 1/3", cadence 60 images/s, interface 2x USB 2.0 et prise SD, moniteur couleur LCD 12", éclairage annulaire LED avec 56 LEDs, inc. clé USB 16 GB et souris.

Microscope numérique 5MP sans oculaire RyecoCam FHD



Dimensions: l=260/280mm x l=320mm x h=532mm max.

Ryf Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly / Calibration

SAP no. de commande: R-FHD-3000-1001.1

www.ryfag.ch

Agrandissement optique Ryecocam R-FHD-3000-5.0 MPix

Ratio du zoom:	Agrandissement:
0.7x	14x
1.0x	23x
1.5x	32x
2.0x	45x
3.0x	65x
4.0x	90x
4.5x	95x